

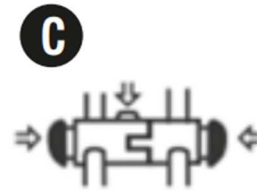


# WELLPRIME®

## Miracle Massager

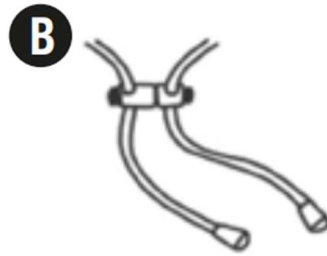

**D**

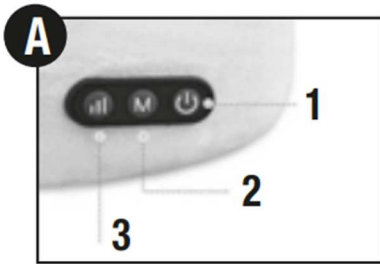

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Wellprime Miracle Massager, την εργονομικά σχεδιασμένη συσκευή μασάζ, που προσαρμόζεται στον αυχένα σας και διατηρεί το κεφάλι σας σε άνετη θέση.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας και όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης σε ένα προσβάσιμο μέρος για μελλοντική χρήση.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Μην τοποθετείτε το Wellprime Miracle Massager στο μπάνιο ή σε υγρό μέρος.
2. Διατηρείτε πάντα το Wellprime Miracle Massager στεγνό. Μην το αποθηκεύετε σε υγρούς χώρους ή κοντά σε δοχεία με νερό στα οποία μπορεί να πέσει.
3. Δεν είναι αδιάβροχη- αν η συσκευή πέσει στο νερό, μην την αγγίξετε ή την επαναχρησιμοποιήσετε. Μην βυθίζετε τη συσκευή κάτω από το νερό.

4. Τα παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
5. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση, δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
6. Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στο άμεσο ηλιακό φως ή σε υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
7. Αυτό το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Απορρίψτε αυτό το προϊόν, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος.
8. Μην φορτίζετε ποτέ τη μπαταρία, εάν η θερμοκρασία είναι κάτω από 0°C. Χρησιμοποιείτε, φορτίζετε και αποθηκεύετε τη συσκευή, σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C.
9. Αποφύγετε τη φόρτιση της μπαταρίας εκθέτοντάς την σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγή θερμότητας.
10. Μην φορτίζετε ποτέ τη μπαταρία συνεχώς, για περισσότερες από 48 ώρες.
11. Για τη φόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε μόνο την αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με αυτή τη συσκευή.
12. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει, μόνο με το παρεχόμενο τροφοδοτικό.
13. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
14. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν δεν λειτουργεί σωστά και η συσκευή μασάζ είναι κατεστραμμένη ή ελαττωματική.
15. Σε περίπτωση σοβαρού ή έντονου πόνου κατά τη διάρκεια του μασάζ, σταματήστε αμέσως το μασάζ και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
16. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν απευθείας σε πρησμένες, ερεθισμένες ή φλεγμονώδεις περιοχές ή εξανθήματα.
17. Μην φορτίζετε το προϊόν, όταν η παροχή ρεύματος είναι ασταθής.
18. Μην αγγίζετε το τροφοδοτικό και το φιλς με βρεγμένα χέρια, για να αποφύγετε δυσλειτουργία ή ηλεκτροπληξία.

Περιεχόμενα:

Εικόνα Α.

- 1- Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης On/Off
- 2- Μ: Λειτουργίες (αλλαγή λειτουργίας/προγράμματος)
- 3- Ταχύτητα

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

1. Πατήστε το κουμπί On/Off για 2 δευτερόλεπτα και η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί.

Πατώντας το κουμπί λειτουργίας από προεπιλογή, θα θέσει τη συσκευή στη λειτουργία: μασάζ + θέρμανση + δόνηση.

2. Πατήστε το κουμπί «M» για να αλλάξετε λειτουργία:

Πατώντας το M, 1 φορά: «κλικ 1» θα έχετε τη λειτουργία: θέρμανσης + δόνησης.

Αν το πατήσετε 2 φορές « κλικ 2»: θα μεταβεί σε λειτουργία θέρμανσης.

Αν το πατήσετε 3 φορές « κλικ 3»- θα αλλάξει σε: μασάζ + θέρμανση.

Και αν το πατήσετε 4 φορές θα έχετε μόνο τη λειτουργία μασάζ.

3. Πατήστε το κουμπί «III» ταχύτητα: για να αλλάξετε ταχύτητα.

Το Wellprime Miracle Massager διαθέτει 3 ταχύτητες: χαμηλή, μεσαία και υψηλή. (εικόνα A)

4. Όταν σταματήσετε να το χρησιμοποιείτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα, για να το απενεργοποιήσετε. (Εικόνα A)

Κάθε πρόγραμμα έχει προκαθορισμένη διάρκεια 14 λεπτών. Μετά από 14 λεπτά, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

Η συσκευή λειτουργεί με μια ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου.

Εάν η μπαταρία πρόκειται να εξαντληθεί ή έχει εξαντληθεί, φορτίστε τη συσκευή πριν από τη χρήση. Κατά τη φόρτιση, χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης αυτού του προϊόντος, για να ελέγξετε αν η σύνδεση ρεύματος είναι κανονική και συνδέστε το για να φορτίσει.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ αυτό φορτίζεται.

Η φόρτιση του Wellprime Miracle Massager διαρκεί περίπου 2-3 ώρες.

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει αξεσουάρ μόνο για χρήση με αυτό το μηχάνημα. Άλλα αξεσουάρ που κυκλοφορούν στην αγορά, δεν αντικαθιστούν αυτό το προϊόν.

(ΣΧΗΜΑ Β). Το Wellprime Miracle Massager διαθέτει ένα εξάρτημα στερέωσης, για να προσαρμόζεται γύρω από το λαιμό.

(ΣΧΗΜΑ C). Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος.

(ΕΙΚΟΝΑ D). Πιέστε προς τα πάνω και προς τα κάτω για να χαλαρώσετε.

### **Σύνθεση:**

Υφασμα: 100% πολυεστέρας

Γέμισμα: Βισκοελαστικός αφρός

Μαξιλαροθήκη

Καθαρισμός και συντήρηση:

Η μαξιλαροθήκη, η οποία είναι μαλακή και βελούδινη, μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να πλυθεί.

Ξεκουμπώστε το φερμουάρ της μαξιλαροθήκης. Αφαιρέστε την αφρώδη γέμιση και πλύνετε τη μαξιλαροθήκη, σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας και πλυσίματος που αναγράφονται στην ετικέτα σύνθεσης και φροντίδας του Wellprime Miracle Massager.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο αφρός μνήμης δεν μπορεί να πλυθεί. Μόνο η μαξιλαροθήκη μπορεί να πλυθεί.

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Ισχύς: 3.7w

Είσοδος: 5V=1A

Μπαταρία: 3.7V= 1200 mAh 4.44Wh

#### **Εγγύηση Ποιότητας**

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων, η οποία υπόκειται στις χρονικές περιόδους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, αμελή εμπορική χρήση, μη φυσιολογική φθορά, ατυχήματα ή ακατάλληλο χειρισμό.

#### **Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών συσκευών**

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην απορρίπτονται στα συνήθη μη διαλεγμένα αστικά απορρίμματα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το διαγραμμένο σύμβολο του «τροχήλατου κάδου» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας, ότι όταν απορρίπτετε τη συσκευή, πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθύνονται στις τοπικές αρχές ή στον έμπορο λιανικής πώλησης για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη της παλιάς τους συσκευής.

Κατασκευάζεται στην Κίνα



Υφασμα: 100% πολυεστέρας

Γέμισμα: Βισκοελαστικός αφρός